



Направление на дополнительное лучевое обследование (мультиспиральная компьютерная томография)


ФИО пациента:

Возраст:

Диагноз:

Цель исследования: определение объёма и характера деформации, предоперационный расчёт и планирование костно -реконструктивной операции

Зона обследования и укладка больного:

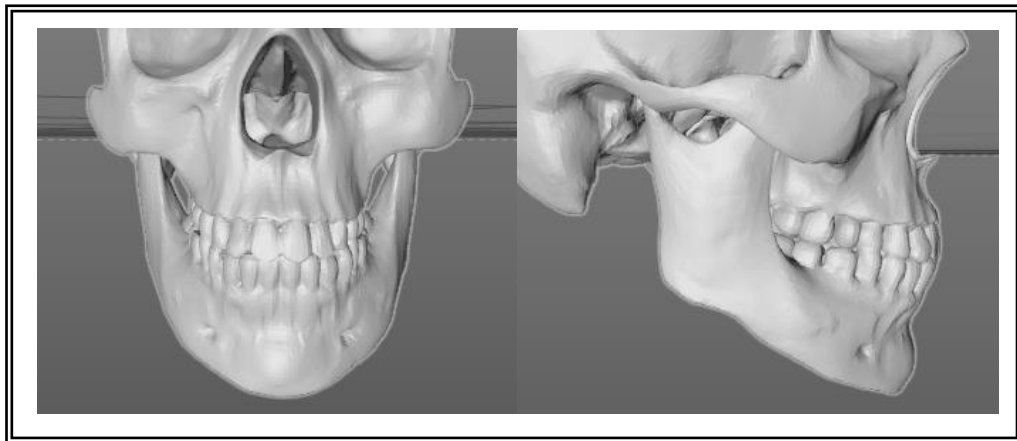

Особенности: при выполнении исследования челюсти в привычном положении, не смыкать, СЛЕГКА РАЗОМКНУТЫ.

Если у больного имеется металлоконструкция, брекет- система, коронки.

Для уменьшения «шумов/ артефактов»

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА:

Сомкните губы и надуйте щеки, постарайтесь набрать в рот побольше воздуха. Держите щеки надутыми и расслабленными, дышите носом, разомкните зубы (около 1 см.), в это же время коснитесь неба кончиком языка.

(Данная методика описана и доказана в диссертации Герасимова Антона Сергеевича).

- Толщина среза- 1.25 мм, лучше меньше
- Размер пикселя- 0,60 мм или меньше
- Gantry Tilt - 0°
- Размер вокселя- 0.3 - 0.5 мм
- Фильтр - мягкие ткани.

Запись на «____» _____ г.

Лучший врач _____ / _____ /