



**Направление на дополнительное лучевое обследование  
(мультиспиральная компьютерная томография)**


**ФИО пациента:** \_\_\_\_\_

**Возраст:** \_\_\_\_\_ лет

**Диагноз:** \_\_\_\_\_


**Цель исследования:** определение объёма и характера деформации, предоперационный расчёт и планирование эндопротезирования коленного сустава.

**Зона обследования:** от голеностопного сустава до головки бедренной кости

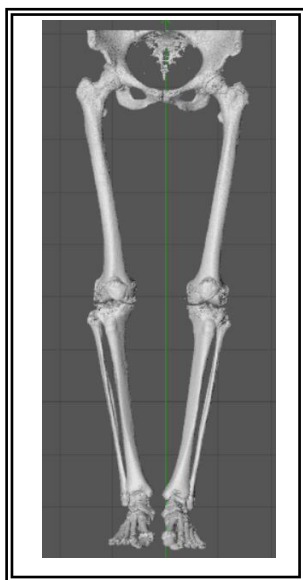

**Укладка:** Лежа на спине, ноги упираются в полочку, пациент тянет максимально ручку прикреплённую к полочке.

**Обратить внимание: на центральное расположение стоп, стопы полностью упираются в полочку, ноги не сводить, перекос полочки недопустим, необходимо выровнять пациента!**

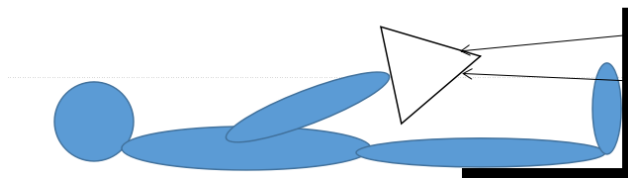

**KV** - 120

**mAs** - как указано автоматической системой

**Pitch** - ≤1

**Matrix** - 512 x 512

**минимальный FOV (поле зрения)** – ≤ 25 x 25 см (двусторонний: не более 32 см)

**Толщина среза** - 1,25-1,50 мм

**Инкремент фрагмента (Slice increment)** - 0,625-0,75 мм (50% перекрытие)

**Фильтр** - мягкие ткани.

Запись на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Леч.врач. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /